

ST-50


ユニバーサルデザインで診療を支える
スマートテーブル

- 医師と患者さん双方の使用環境をサポート
- 柔軟な操作性で診察の流れをアシスト
- 省スペース化に配慮したスマート設計



Serving Your Vision

スリットランプが使いやすいスマートテーブル。
患者さんの動作を考慮した構造と医師の
使いやすさを両立し、診察室にすっきりと収まる
デザインで、診療をサポートします。

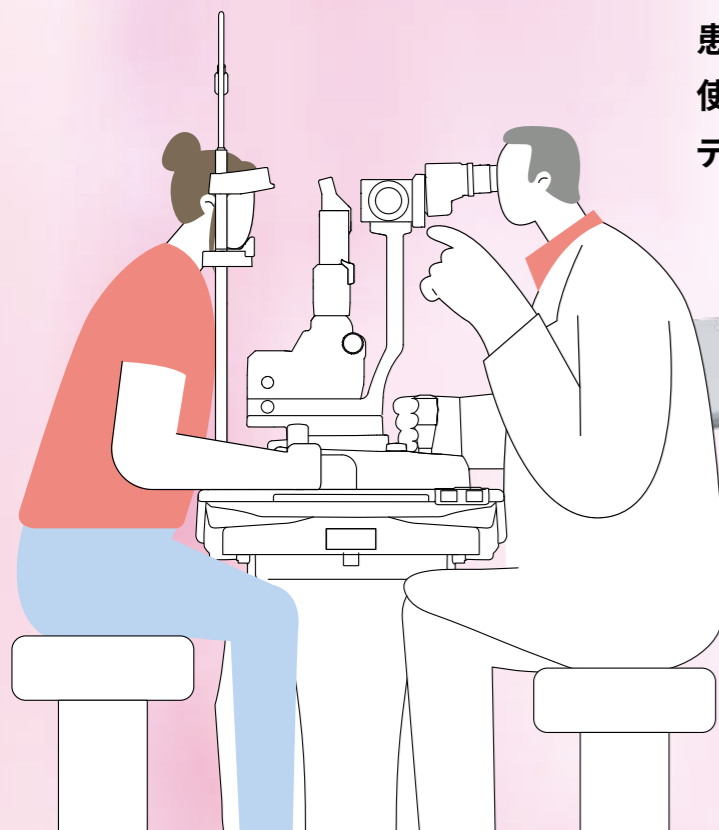

スリットランプと患者さんの位置合わせをスムーズにする操作性

柔軟な操作方法と多様な診察シーンを想定した設計により、診察時の操作性向上に寄与します。

オートスライド、 手動スライド

診察の状況や患者さんの状態に応じて、
スライド方法の選択が可能です。



椅子の昇降スイッチ


テーブルから患者椅子[※]の昇降操作が
可能で診察フローを支援します。

※接続可能なモデルは、電動患者椅子 (CR8) です。



昇降ストローク

最低高さ620mm、最高高さ920mm
で、幅広い体格の患者さんに対する
診察を想定した構造です。

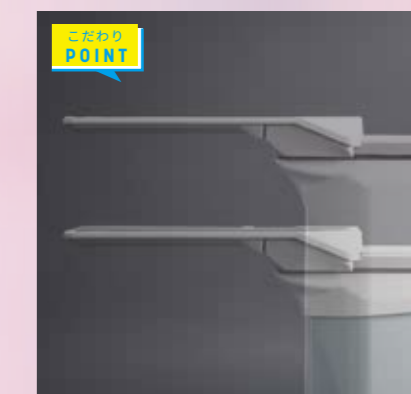

使用環境に配慮した設計

医師と患者さんの双方の使用環境に配慮した設計で、診察環境づくりに寄与します。


セーフティスイッチ

テーブル裏面は機械部分が露出しないようカバーで覆い、
カバー全面にセーフティスイッチ機能を持たせているため、
挟み込みや不意の接触を抑える構造です。また、機械油による
衣服の汚れと診察室の清潔管理にも配慮しています。



テーブルの薄型設計

テーブル下のスペースを広く確保し、手や大腿の接触リスクを
低減することを考慮した薄型設計により、診療中の負担軽減
に貢献します。

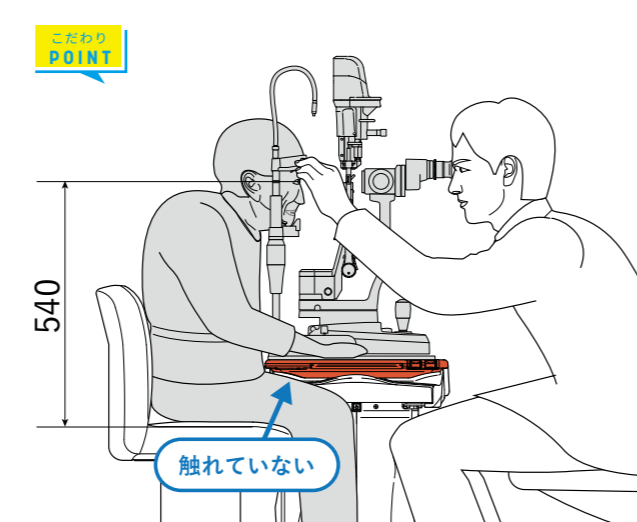

院内に調和するスマート設計

周辺機器の配置を整えやすい設計で、効率的なレイアウト構成をサポートします。

スリットランプ取付キット

各社スリットランプの取り付けも想定し、設置の柔軟性を
確保しています。

※詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

整理しやすい構造

スライド式テーブルやケーブル取り出し口を内蔵し、効率的な
周辺機器の設置やスペース確保により診療空間を整えます。



シンプルな外観

無駄のないデザインが、診察室のレイアウトに調和します。




製品詳細はWEBサイトへ



仕様

販売名称	スマートテーブルST-50
最低高さ	620 mm
最高高さ	920 mm
スライドストローク	500 mm
許容荷重	30 kg
電源	AC 100-230 V, 50-60 Hz
消費電力	1500 VA
重量	103 kg (ウェイト5.6 kg×5個含む)

寸法図 外形寸法 (mm)

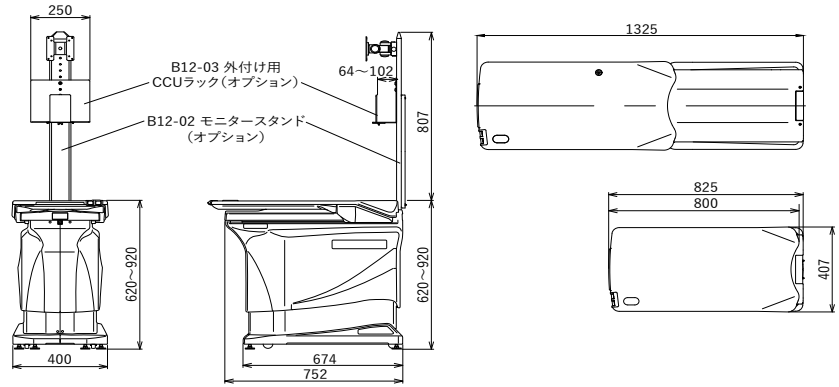

豊富なオプションで柔軟なカスタマイズ性

オプション品




1	B12-02	モニタースタンド	液晶モニターの取付可能
2	B12-03	外付け用CCUラック	カメラコントロールユニットが収納可能
3	B12-14	スコープホルダー Bタイプ	左手引き用
4	B12-15	スコープホルダー Aタイプ	右手引き用

※スコープホルダーにはアウターカバーとインナーカバーが付属します。
※左の写真は株式会社オカムラのシステムデスクを組み合わせています。

レイアウト

Aタイプ、Bタイプの2種類があります。これらタイプは工場オプションです。それぞれのタイプを納品後に変更することはできません。注文時に診察室のレイアウトに合ったタイプを指定してください。

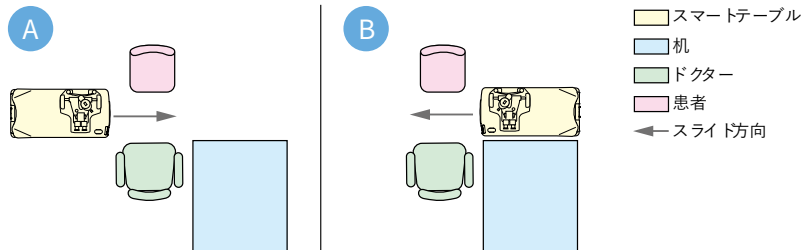

安全に正しくお使いになるために、「取扱説明書」をよくお読みいただいでからご使用ください。

- 製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
- 撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

機械器具01 手術台及び治療台 13958009 汎用診断・処置用テーブル 一般医療機器

届出番号 20B1X10006000012

株式会社タカギセイコー

本社 〒383-8585
長野県中野市岩船330-2
TEL. (0269) 22-4512
FAX. (0269) 26-6321

東日本支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1
ショールーム アウルタワー2階 205号室
(TVC) TEL. (03) 5615-9282
FAX. (03) 5615-9283
西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市市庄内幸町5-19-8
ショールーム TEL. (06) 6334-4512
(TVC) FAX. (06) 6334-4521



<https://www.takagi-j.com>

販売代理店



株式会社タカギセイコー