

SINGLE USE

## Single use lenses – Surgical サージカルレンズ

単回使用検査用コンタクトレンズです。高透過率/反射防止コーティングのレンズを採用し、非常に明るくクリアな眼底像を提供します。各レンズは安心して便利な滅菌済みパッケージです（10個入り）。ディスプレイ製品ですので、一回限りの使用になります（再使用不可）。



**K30-1400**  
サージカルゴニオプリズム RH

**K30-1405**  
サージカルゴニオプリズム LH

単回使用のサージカルゴニオレンズです。  
緑内障手術の際に隅角のクリアな像を提供します。右手用と左手用の2種類があります。  
倍率:1.20x



**K30-1020**  
1ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。  
特殊コーティングを施し、反射も少なく等倍でクリアに隅角を観察することができます。  
倍率:1.0x



**K30-1010**  
4ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。4枚64°のミラーを配置することで回転させることなく、前房隅角全周を観察することができます。  
倍率:0.8x



**K30-1520**  
サージカルワイドフィールドレンズWHD

広視野で歪みのない鮮明な眼底像を提供します。  
反射防止コーティングを施しています。  
視野:155° 倍率:0.42x

## 硝子体レンズ&アクセサリ

### A **K30-1440** フラットレンズ

単回使用の硝子体レンズです。  
レンズ前面がフラットになっており、硝子体中央部の観察等に有効です。  
視野:36° 倍率:1.02x



### B **K30-1435** 拡大レンズ

単回使用の硝子体レンズです。後極部の詳細な観察に有効です。  
視野:30° 倍率:1.20x




### C **K30-1430** コンケーブレンズ

単回使用の硝子体レンズです。空気置換時の眼底観察に有効です。  
視野:25° (空気置換時) 倍率:0.8x



### D **K30-1535** スーチャーリング タブ付

このタブ付きリングは、硝子体レンズを安定して保持するプラットフォームを提供します。  
またタブ無しスーチャーリング(K30-1530)もご用意しております。

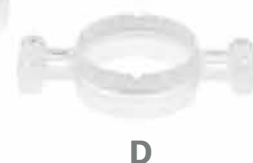

### **K30-1420** 20° プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。  
20°プリズムレンズで歪みもなく後極部眼底周辺を観察できます。  
視野:36° 倍率:1.02x



### **K30-1425** 30° プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。  
30°プリズムレンズで歪みもなく赤道周辺部を観察できます。  
視野:30° 倍率:1.02x



### **K30-1450** サージカルワイドフィールドレンズ

単回使用のワイドフィールドレンズです。  
広視野で歪みなく鮮明な眼底像を提供します。  
視野:155° 倍率:0.42x

販売名:Katena検査用コンタクトレンズ  
認証番号:第227AFBZI00100000号

PB(K-SURG)J Rev.2