

CR8

快適性を重視した、
コードレス電動患者椅子

- コードレスで足元すっきり
- Bluetooth接続による遠隔操作
- 低重心構造で、使用時の安定感に配慮



診察や検査の場面で求められる「安全」と「快適」。CR8は患者さんへの思いやりと医療スタッフの負担を減らして、日々の診療をスムーズに進めやすい環境づくりを支援します。

患者さんや医師、 スタッフに配慮した設計

コードレス設計により足元をすっきり保つことができ、患者さんの動線確保や清掃のしやすさに配慮した構造です。さらに、コード、電源コンセントの位置などの制約を受けにくいことから、レイアウトの自由度が広がります。

足元がすっきりし、つまずきにくい構造。

床掃除も楽になり、床を清潔に保ちやすくなる。



シンプルで使いやすい操作性

Bluetooth接続とシンプルな操作によって、医師だけでなくスタッフも簡単に遠隔操作が可能です。診療中の細かな調整もスムーズに行え、効率的な診療環境を支援します。

簡単な手順でペアリングが可能。
複数台設置した場合でも、それぞれの椅子を個別に操作できる。

赤外線通信に比べ、
遮蔽物の影響を受けにくい
通信方式。


診察スタイルに合わせて、
フットコントローラー、
ハンドコントローラー*¹、
またはスライドテーブルST-50の
スイッチ*²による操作が可能。

*¹ ハンドコントローラーはオプションでご用意しています。
*² ST-50と組み合わせるには、オプションのST-50トランスミッターが必要です。


快適性を高める設計

低重心構造と360°回転シートにより立ち座りがしやすいです。さらに、長時間の運用を考慮したバッテリーを採用しました。

低重心構造により、立ち座り時に
ぐらつきにくい構造。

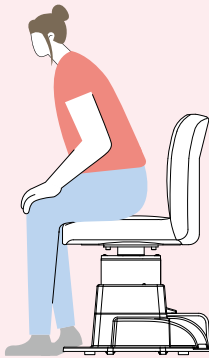

360°回転により、立ち座りの
動作をサポート。

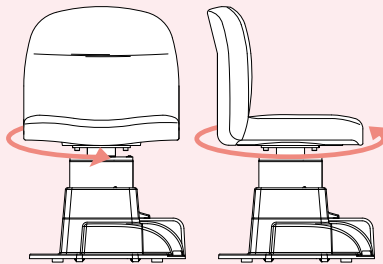


長寿命バッテリーを採用。
インジケーターで残量を
一目で確認できる。



仕様

販売名称	コードレス電動患者椅子CR8	
昇降ストローク	150 mm	
許容荷重	150 kg	
無線通信	無線方式	Bluetooth Low Energy
入力電源	AC 100 V, 50-60Hz	
消費電力	120 VA	
重量	28 kg	

寸法図 外形寸法 (mm)

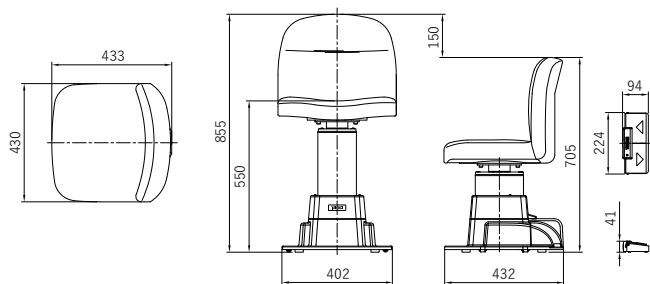

製品詳細はWEBサイトへ



安全に正しくお使いになるために、「取扱説明書」をよくお読みいただいでからご使用ください。

- 製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
- 撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

機械器具01 手術台及び治療台 15723000 眼科診療・処置用椅子 一般医療機器

届出番号 20B1X1006000001

株式会社タカギセイコー

本社 〒383-8585
長野県中野市岩船330-2
TEL.(0269)22-4512
FAX.(0269)26-6321

東日本支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1
ショールーム アウルタワー2階 205号室
(TVC) TEL.(03)5615-9282
FAX.(03)5615-9283
西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市庄内幸町5-19-8
ショールーム TEL.(06)6334-4512
(TVC) FAX.(06)6334-4521



<https://www.takagi-j.com>

販売代理店



株式会社タカギセイコー