


NEW



K30-1407 Hands-Free Gonio Prism ハンズフリーゴニオレンズ

MIGS等に最適な、滅菌済みディスプレイザブル（再使用不可）ゴニオレンズです。
軽量で高品質なオプティックスは術中の明瞭な視野を提供します。

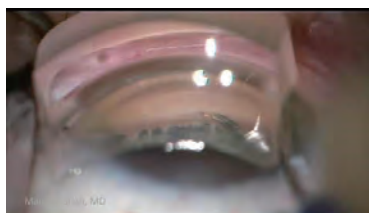

Katena's Hands-Free Gonio Hydrus Single Hand



SPECIFICATIONS

倍率	寸法	重量	個数
1.2x	11 x 11 x 8 mm	0.5g	10個入り/箱

販売名: Katena検査用コンタクトレンズ 認証番号: 第227AFBZI00100000号

NEW



K31-1120 Diamond Capsulotomy Lens カプスロトミーレンズ

再使用可能な後発白内障YAGレーザー治療用に設計
されました。従来よりも大きなボタンレンズを採用しま
した。後囊の観察及び治療に最適です。
倍率: 1.80x レーザースポット倍率: 0.56x

NEW



K31-1130 Diamond Iridotomy Lens イリドトミーレンズ

再使用可能なレーザー虹彩切開用レンズです。
従来よりも大きなボタンレンズを採用し、虹彩周辺の
観察及び治療に最適です。
倍率: 1.60x レーザースポット倍率: 0.63x

BEST
SELLER

RETINA 200

REUSABLE LENS FOR RETINA TREATMENT




K31-1330 レチナ200レーザーレンズ

レチナ200レーザーレンズは、革新的な200°の最大視野角を誇り、周辺部に至るまで
歪みの少ない眼底像を提供します。眼底全体の観察及び糖尿病性眼疾患、加齢性黄斑
変性症、汎網膜光凝固術や周辺部凝固術に最適です。

- ・網膜全体を観察し治療するための広い視野を提供
- ・鋸状縁を含む網膜の観察が可能
- ・反射防止コーティング

倍率: 0.6x レーザースポット倍率: 1.67x 視野角: 200°

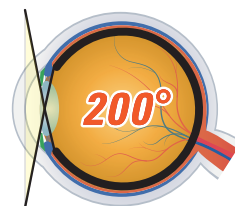

販売名: Katenaリユーザブルレンズ 認証番号: 第301AFBZI0013000号 Rev.0